


Patroon en stappenplan

voor het stikken van mondkmaskers FFP1
voor medisch gebruik

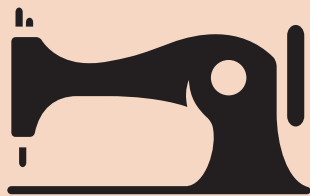

Van de Velde

Benodigdheden:

- Vouwbaar steriel medisch papier / textiel (werk met een dubbele laag katoen)
- Naaimachine: overlockmachine of éénnaaldmachine.
- Van de Velde-patroon (geschikt voor mondmaskers FFP1)
- 2 linten van elk 90 cm
- Plooibaar metalen staafje voor de neusbrug (vb. archiefbinder)

Download het patroon:

- https://www.dropbox.com/s/ke1vvprmyfl35k8/pattern_VDV_mouthmask.pdf?dl=0


Stappenplan:

Zorg steeds voor een steriele werkomgeving en draag een **mondmasker** en **handschoenen** bij het maken van de mondmaskers.


Heeft u geen handschoenen?

Hanteer een goede handhygiëne en was uw handen zorgvuldig gedurende 60 seconden. Vermijd contact met uw gezicht.

1. Knip het patroon uit het papier.

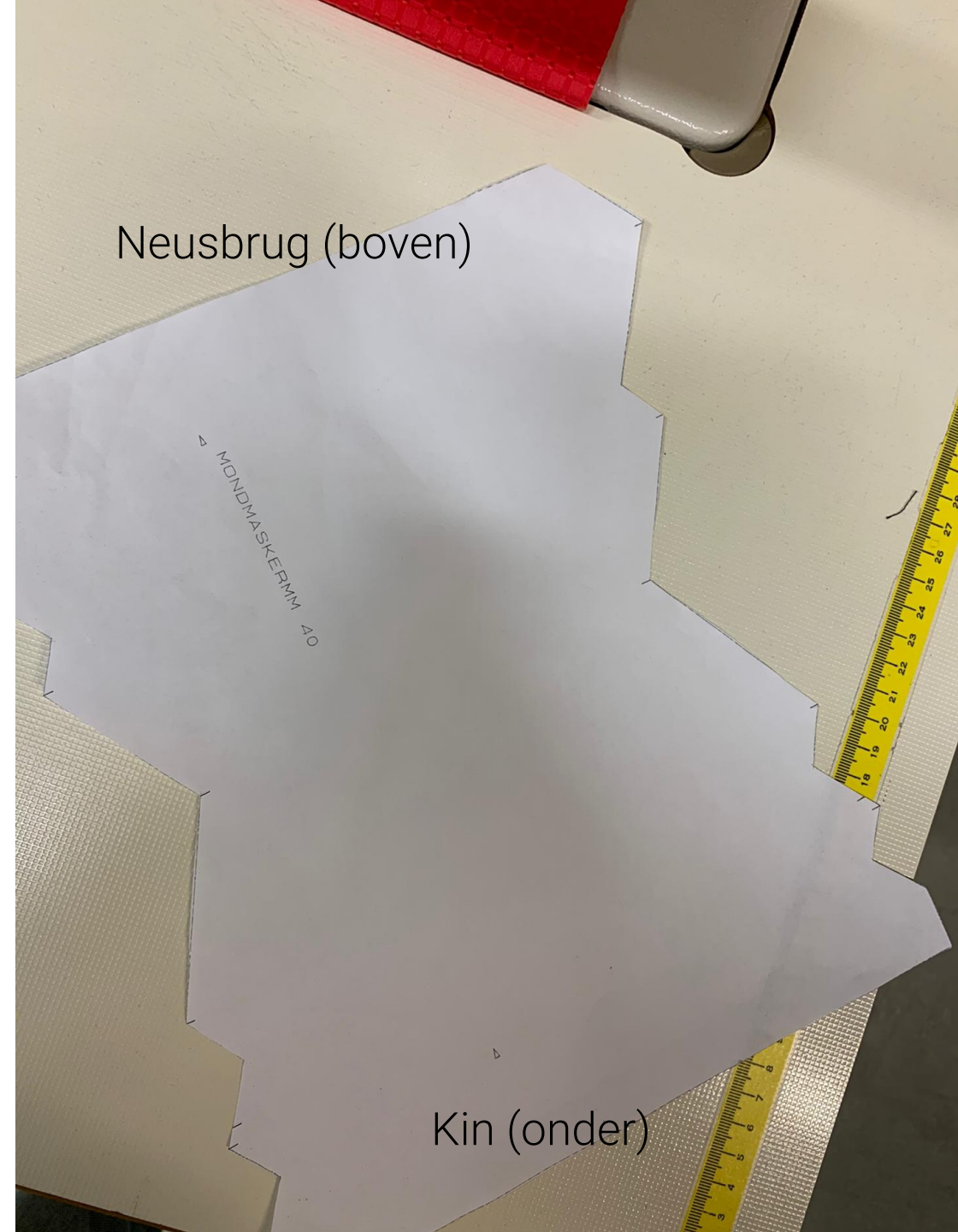

2. Knip vervolgens het patroon uit de steriele doeken.

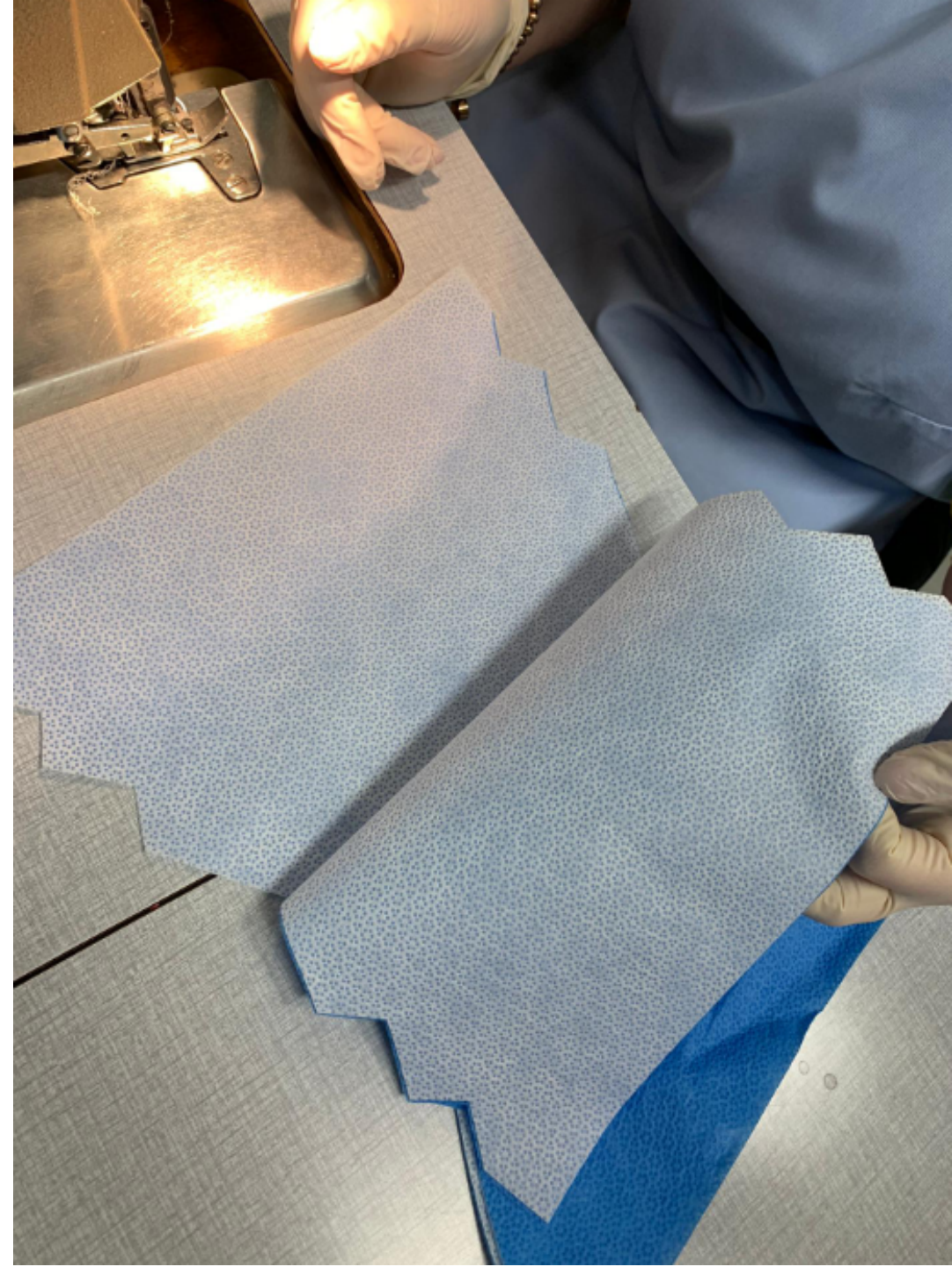

3. Maak **de onder- en bovenkant** van de steriele doeken vast, die de kin en neusbrug van het masker vormen. Dit kan met een overlockmachine of een éénnaaldmachine.



4. Stik het masker eerst middendoor,
van knip naar knip.



4. Vouw de kant van de neusbrug om.



6. Stik tot het midden en steek ongeveer halfweg de neusbrug erin. Stik verder tot het einde.



7. Stik verticaal naast de neusbrug, zowel links als rechts, zodat de neusbrug goed vast zit.



8. Vouw de plooi naar boven volgens de knipjes, nog steeds aan dezelfde kant van de neusbrug.



9. Stik de plooi vast. Herhaal deze stap aan de andere kant



10. Vouw en stik vervolgens de 2 knipjes aan de kin tot 2 plooien



11. Plooi het masker op de middenlijn dubbel.
U zal zien dat het deel van de neusbrug korter
is dan het deel van de kin, dat is normaal.




12. Neem 1 lint van 90cm en plooi het dubbel op 45 cm



13. Leg het geplooide lint vervolgens gelijk met de rand van de eerste plooi, aan de neusbrug en stik deze goed vast



14. Herhaal stap 13 voor het andere lint en de andere kant

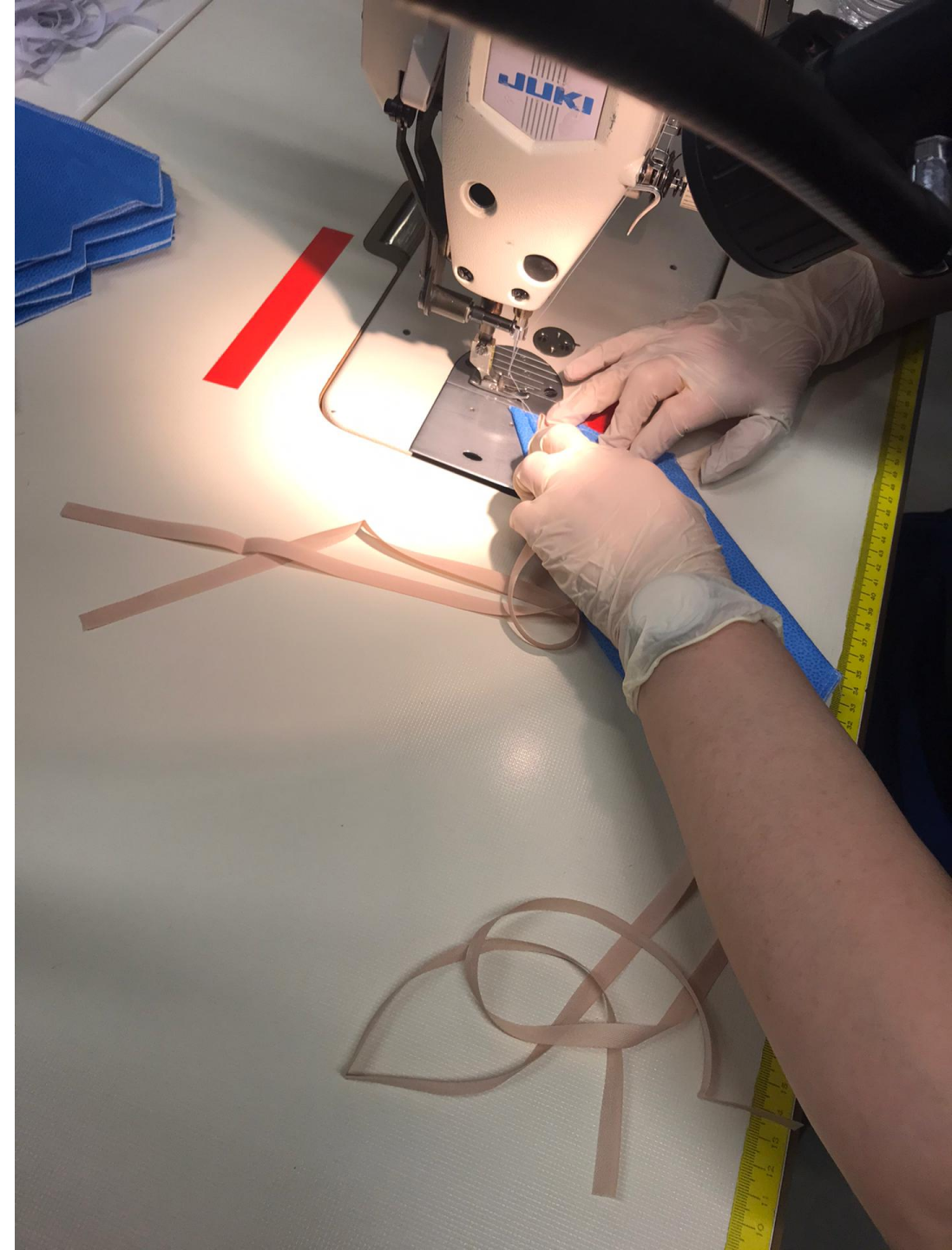

15. Overlock de zijkanten of zorg ervoor dat ze netjes afgewerkt zijn, zodat er geen irritatie ontstaat.



Uw mondmasker is nu klaar!

Verzamel 10 mondmaskers in een plastieken zakje en knoop dit goed dicht. Alle zakjes mogen bezorgd worden aan het onthaal van het A.S.Z Ziekenhuis van Aalst.

Bedankt!



Bedankt!



Van de Velde
